



לפני ההדבקה, תוך שימוש ב-Try-in Paste של רזין ההדבקה בו יעשה שימוש.

7. בחירת סוג הדבק: הדבק עצמו תורם לכ-10% מתפיסת הצבע הסופית של הציפוי המודבק, ולכן חשוב לבחור בדבק שיניב תוצאה אסתטית. מומלץ להשתמש בדבק על בסיס רזין בהקשיה באור בלבד, משום שדבקים עם הקשיה כימית או הקשיה כפולה עלולים לעבור שינוי גוון קל עם הזמן. היבטים חשובים נוספים לבחירת הדבק הרזיני הם בהיבטי חוזק הדבק (אחוז מילוי גבוה ופיזור חלקיקים הומוגני הם בעלי חשיבות) ובהיבטי נוחות העבודה - דבק בעל טיסקוטרופיות גבוהה, שאינו נשפך, יקל על התאמת הציפוי לשן והזרמה אחידה של הדבק לפני הקשייתו באור.

8. הכנה קפדנית של ציפוי החרסין לפני ההדבקה: לאחר בדיקת הציפויים בפה המתרפא והחלטה על גוון הדבק, יש לשטוף את הציפויים היטב ולוודא שהטכנאי ביצע התזת-חול לחלק הפנימי של הציפוי. מומלץ להכין את החרסין בעזרת Palletdent, לבצע שטיפה מרבית ויבוש, צריבה מדויקת של הציפוי בהתאם לסוג החרסין, שטיפה מיטבית נוספת, יבוש כללי של הציפויים ומריחת מולטי-פריימר על הציפויים.

9. בידוד מיטבי של השיניים: יש לבדוד את השיניים המאחזות לציפויים באמצעות סכר גומי, כדי למנוע חשיפה ללחות, ובציפויים תת-חניכיים מומלץ לשקול גם שימוש בחוט רטרקציה. יש לבצע צריבה סלקטיבית של זגוגית השן, ולהניח חומר קישור אדהזיבי לפי הנחיות היצרן על הדנטין והזגוגית. אין לבצע הקשיה של חומר הקישור בשלב זה, אלא רק לאחר ההדבקה!

10. הדבקה: יש למרוח חומר קישור על הציפוי ולייבש בלחץ אוויר כדי לדקק אותו, להניח את הדבק הנבחר ולהדביק באופן מיידי. עיכוב עלול לגרום לזליגת הדבק (ולכן חשיבות השימוש בדבק טיסקוטרופי) ולתחילת הקשייתו בחשיפה לאור.

11. הקשיה באור: יש לבצע פולימריזציה במספר פולסים נפרדים מכמה כיוונים כדי לוודא את החזקת הציפוי במקומו, להסיר עודפי דבק בהירות באופן ידני, לבצע ליטוש עדין של שולי השחזור באמצעות גומיות ליטוש ולבצע הקשיה סופית באור.

בהצלחה!



לאחר ההדבקת הציפויים

השימוש בציפוי חרסין הולך ומתרחב בשנים האחרונות, כחלק מפילוסופיית רפואת השיניים הזעיר-פולשנית, ויחד אתו מתרחב גם מגוון האפשרויות העומדות בפני רופא השיניים להשגת תוצאה אסתטית מצוינת, תוך שימוש בעקרונות רפואת השיניים האדהזיבית.

הדרישות האסתטיות, הרגישות של הדבקת הציפויים (שעוביים הוא לפעמים רק 0.3 מ"מ), הצורך במיקום מדויק והרגישות של טכניקת הביצוע - מחייבים הקפדה על כל אחד מהשלבים. לכן, במאמר זה קיבצתי כמה עצות קליניות מועילות להדבקת ציפוי חרסין:

1. דיוק מרבי של המידות לגילוף האבחנתי: על המידות לגילוף האבחנתי, דיגיטלי או אנלוגי, להיות ברמת דיוק מרבית. לשם שיפור הדיוק חשוב לצרף גם תמונות של חיוך פרונטלי שלם, חיוך פרונטלי קרוב, חצי פרופיל, פרופיל שלם, תמונות רטרקטוריות של כל הפה ותמונות פורטרט - פרטים אשר יקלו על הטכנאי לבצע גילוף אבחנתי אידיאלי. כמו כן, אם מבצעים הכנה דיגיטלית - חובה להדפיס את המודל!



מצב ראשוני

2. יצירת אינדקסים להשחזה ולשחזורים זמניים: כדי להשחזר באופן נכון, לשמר חומר שן בריא ולשמר כמה שיותר נתונים נכונים בזגוגית השן, השימוש באינדקסים חשוב לקבלת תוצאה מדויקת.



אינדקס להשחזה

3. חשיבות חשיפת קו הסיום: בשל הצורך במיקום מספר ציפויים זה לצד זה, מיקום השחזור הסופי הוא קריטי. לכן לפני לקיחת המידה יש לעשות שימוש בחוט רטרקציה כאשר מבצעים ציפוי תת-חניכי, כדי להגיע למידה מדויקת שבה הגבולות חשופים לטכנאי, שיוכל לדייק בקו הסיום שלנו. התקשורת עם הטכנאי וסימון קו הסיום גם הם דרישה בסיסית לקבלת שחזור מעבדתי מדויק.

4. מניעת רגישות ממקור דנטינלי: בהשחזה החושפת את הדנטין בשיניים ויטליות יש חשיבות למניעת רגישות-יתר עם הדבקת שחזורי המעבר. לכן יש לבצע איטום דנטין מיידי בשיטת IDS (Immediate Dentin Sealing) - בטכניקה של ד"ר פסקל מאנה) או להשתמש בחומר מפחית-רגישות.



איטום דנטין מיידי לאחר ההשחזה

5. בחירת חומר קישור: השימוש בחומר קישור (בונדינג) מדור 4 או 5 בזמן הדבקת השחזורים הזמניים יעזור לנו גם להדבקת שחזורי המעבר וגם להפחתת הרגישות הדנטינלית.

6. תיאום ציפיות המתרפא ובדיקת צבע: התוצאה האסתטית תלויה במידה רבה בדעת המתרפא. מעבר לתיאום הציפיות הראשוני שלפני הטיפול, יש חשיבות לביצוע שחזורי-מעבר אסתטיים כדי להבין את רצונות המתרפא והסתייגויותיו, באמצעות שחזורי מעבר מעבדתיים או בייס-אקריל בעל רמת אסתטיקה גבוהה ליישום מרפאתי. כמו כן מומלץ לבחון את הציפויים על השיניים המאחזות

G-CEM™ Veneer

נוחות שימוש, חוזק ואסתטיקה
מעל למצופה!




דבק שרף מוקשה-אור להדבקה קלה וחזקה של ציפויי חרסינה ומילואות

- זרימה בטיקסוטרופיות אידאלית, להנחה קלה
- לא נשפך לאחר ההנחה, ומאפשר להתאים את ציפויי החרסינה ללא לחץ זמן
- מילויי חלקיקים גבוה (69%) בפיזור הומוגני, לחוזק מרבי
- הקשייה באור בלבד, להבטחת יציבות הצבע לאורך זמן
- גוונים: A2, Translucent, Opaque, Bleach
- כולל משחות בדיקה Try in paste לידוא הגוון



באדיבות Dr. J. Mattiussi, איטליה

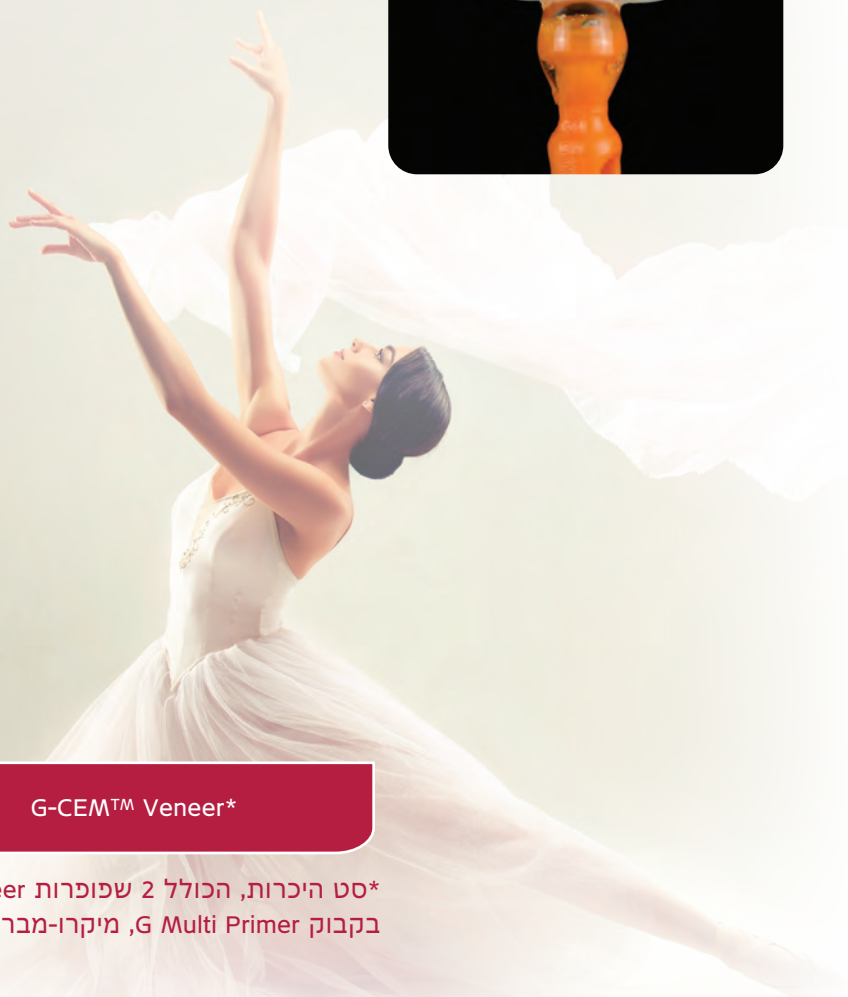

ב- 790 ₪ בלבד!

במקום 990 ₪

G-CEM™ Veneer*

*סט היכרות, הכולל 2 שפופרות G-CEM Veneer, טיפים להזרמה, חומר קישור G-Premio BOND, בקבוק G Multi Primer, מיקרו-מברשות, 2 שפופרות Try-in Paste לבדיקת צבע.